

# FEP

## FIJADOR EXTERNO MODULAR

Ligero  
Modular  
Estéril





# Indicaciones

Fracturas abiertas, cerradas e intra articulares.

Pseudoartrosis, alargamiento de extremidades, correcciones de deformidades y correcciones axiales.

## CARACTERISTICAS

Kit Esteril

Disponible en tres tamaños


Versatil

## VENTAJAS

Listo para su uso

Amplia gama de aplicaciones.

Permite correcciones independientes en todos los planos

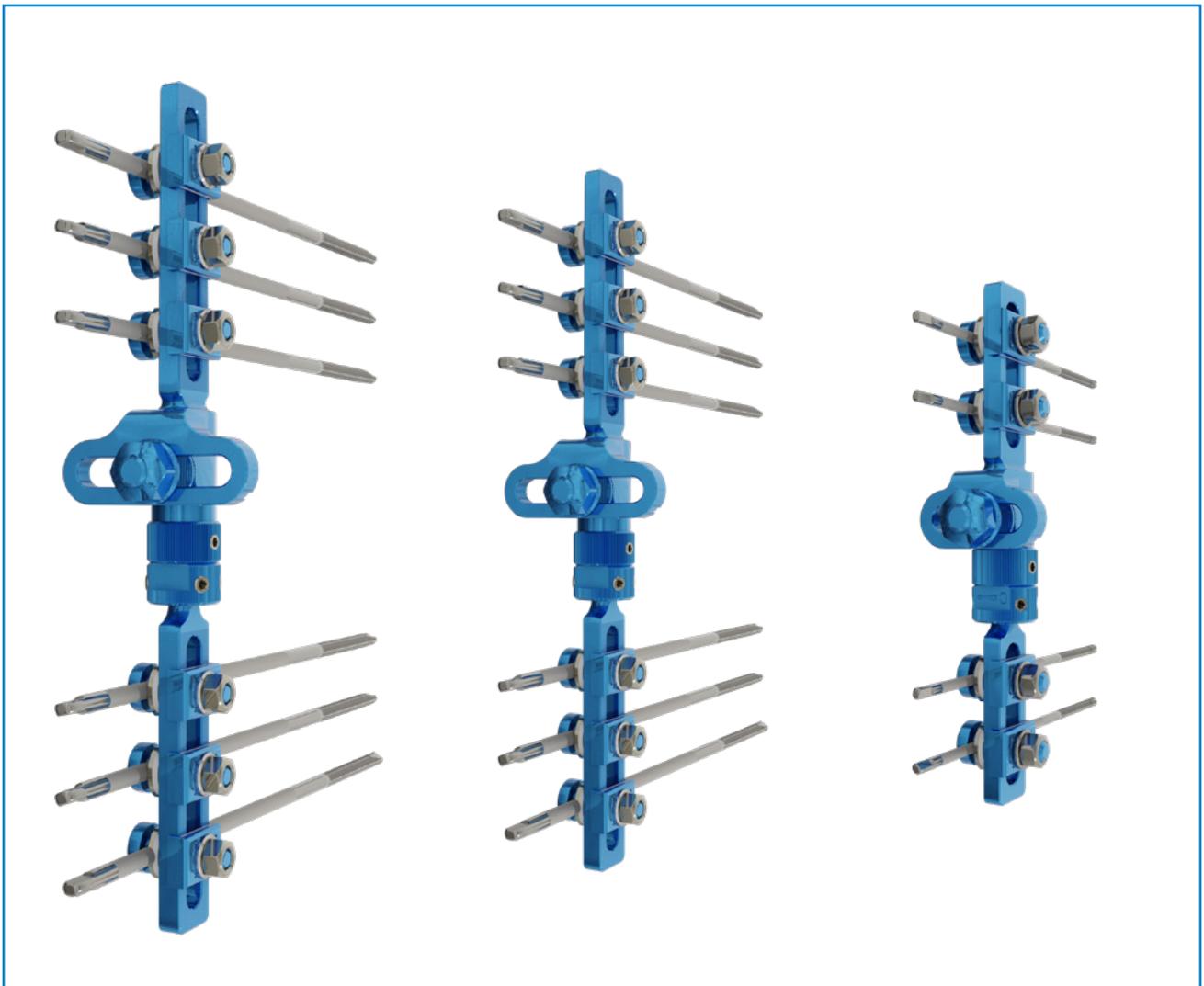

# Kit FEP



## Kit FEP Pequeño - 5000060MST

## Kit FEP Mediano - 5000001MST

## Kit FEP Grande - 5000030MST

Descripcion	Cant.	Descripcion	Cant.	Descripcion	Cant.
Cuerpo del Fijador Pequeño	1	Cuerpo del Fijador Mediano	1	Cuerpo del Fijador Grande	1
Tornillo cortical autoperforante Ø 4.0 mm L 120 mm	4	Tornillo cortical autoperforante Ø 5.0 mm L 140 mm	6	Tornillo cortical autoperforante Ø 6.0 mm L 180 mm	6
Cabezal independiente para FEP Pequeño y Mediano	4	Cabezal independiente para FEP Pequeño y Mediano	6	Cabezal para FEP Grande	6



El kit FEP permite correcciones independientes en los 3 planos. La unidad articular permite una correccion curvatum-recurvatum. La unidad compresion-distraccion permite la correccion de defectos rotacionales. Los reguladores micrometricos permiten una correccion varo-valgo. Cualquier correccion se puede hacer de forma independiente sin perder la correccion anterior.

La elasticidad de la aleacion de Aluminio 7012 favorece los procesos de reparacion del sitio de la fractura asegurando una estabilidad optima.



#### **SEDE LEGAL**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova  
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210  
[www.mikai.it](http://www.mikai.it) - [servizio.clienti@mikai.it](mailto:servizio.clienti@mikai.it)

#### **PRODUCCIÓN**

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)  
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133  
[www.mikai.it](http://www.mikai.it) - [servizio.clienti@mikai.it](mailto:servizio.clienti@mikai.it)